



## AARHUS SCHOOL OF ENGINEERING

SUNDHEDSTEKNOLOGI  
3. SEMESTERPROJEKT

---

## Dokumentation

---

### *Gruppe 4*

Mads Fryland Jørgensen (201403827)  
Jeppe Tinghøj Honeré (201371186)  
Nicoline Hjort Larsen(201405152)  
Freja Ramsing Munk (201406736)  
Sara-Sofie Staub Kirkeby (201406211)  
Tine Skov Nielsen (201404233)

### *Vejleder*

Projektvejleder  
Thomas Nielsen  
Aarhus Universitet

9. december 2015



*Gruppemedlemmer*

Mads Fryland Jørgensen (201403827)	Dato
Jeppe Tinghøj Honoré (201371186)	Dato
Freja Ramsing Munk (201406736)	Dato
Nicoline Hjort Larsen (201405152)	Dato
Sara-sofie Staub Kirkeby (201406211)	Dato
Tine Skov Nielsen (201404233)	Dato

*Vejleder*

Thomas Nielsen	Dato
----------------	------



# **Ordliste**

---

Ord    Forklaring

---



# Indholdsfortegnelse

---

<b>Ordliste</b>	<b>iii</b>
<b>Kapitel 1 Indledning</b>	<b>1</b>
<b>Kapitel 2 Kravspecifikation</b>	<b>3</b>
2.1 Indledning . . . . .	3
2.2 Funktionelle krav . . . . .	3
2.2.1 Aktør-kontekst diagram . . . . .	3
2.2.2 Aktørbeskrivelse . . . . .	3
2.3 Use cases . . . . .	5
2.3.1 Use case diagram . . . . .	5
2.3.2 Use case 1 . . . . .	5
2.3.3 Use case 2 . . . . .	6
2.3.4 Use case 3 . . . . .	6
2.3.5 Use case 4 . . . . .	7
2.3.6 Use case 5 . . . . .	8
2.3.7 Use case 6 . . . . .	8
2.4 Ikke-funktionelle krav . . . . .	9
2.4.1 (F)URPS+ . . . . .	9
<b>Kapitel 3 Design</b>	<b>13</b>
3.1 Indledning . . . . .	13
3.2 Hardware arkitektur . . . . .	13
3.2.1 Design af forstærker . . . . .	14
3.2.2 Design af analogfilter . . . . .	15
3.2.3 Grænseflader . . . . .	18
3.3 Hardware implementering . . . . .	19
3.4 Software arkitektur . . . . .	21
3.4.1 GUI . . . . .	21
3.4.2 Domænemodel . . . . .	24
3.4.3 Appliktionsmodel . . . . .	25
3.5 Software implementering . . . . .	31
3.5.1 UML klassediagram . . . . .	31
<b>Kapitel 4 Test</b>	<b>33</b>
4.1 Indledning . . . . .	33
4.2 Modul/unit test . . . . .	33
4.2.1 Hardware . . . . .	33
4.2.2 Software . . . . .	36
4.3 Integrationstest . . . . .	36
4.3.1 Hardware . . . . .	36

4.3.2 Software . . . . .	36
<b>Kapitel 5 Accepttest</b>	<b>37</b>
5.1 Indledning . . . . .	37
5.2 Acceptttest af Use Cases . . . . .	37
5.2.1 Use Case 1 . . . . .	37
5.2.2 Use Case 2 . . . . .	38
5.2.3 Use Case 3 . . . . .	39
5.2.4 Use Case 4 . . . . .	39
5.2.5 Use Case 5 . . . . .	39
5.2.6 Use Case 6 . . . . .	40
5.3 Acceptttest af ikke-funktionelle krav . . . . .	41
<b>Bilag</b>	<b>45</b>
Fejlrapport . . . . .	45
Logbog . . . . .	45
Mødereférerart . . . . .	45
Kode . . . . .	45
Samarbejds aftale . . . . .	45

# Indledning 1

---

## Ansvarsområde

### Initialer:

JTH - Jeppe Tinghøj Honoré  
TSN - Tine Skov Nielsen  
SSK - Sara-Sofie Staub Kirkeby  
NHL - Nicoline Hjort Larsen  
FRM - Freja Ramsing Munk  
MFJ - Mads Fryland Jørgensen

Afsnit Ansvarlig

---



# Kravspecifikation 2

---

Version   Dato   Ansvarlig   Beskrivelse

---


## 2.1 Indledning

Et blodtryksmålingssystem er blevet udarbejdet, der helt generelt er opbygget af en hardware del og en software del. Hardware delen er opbygget af en forstærker, transducer og analogt filter hvis formål er at kunne forstærke og filtrerer blodtrykssignalet og software delen kalibrerer, nulpunktsjusterer og analysere signalet samt viser signalet grafisk på en brugergrænseafdeling.

Kravspecifikationen vil beskrive, produktets kunnen ud fra nogle opstillede funktionelle og ikke funktionelle krav til systemet. De ikke funktionelle krav er krav, der er opstillet til selve systemet og de funktionelle krav er beskrevet i use cases, som omhandler systemets aktiviteter i forhold til aktører og mål.

## 2.2 Funktionelle krav

### 2.2.1 Aktør-kontekst diagram

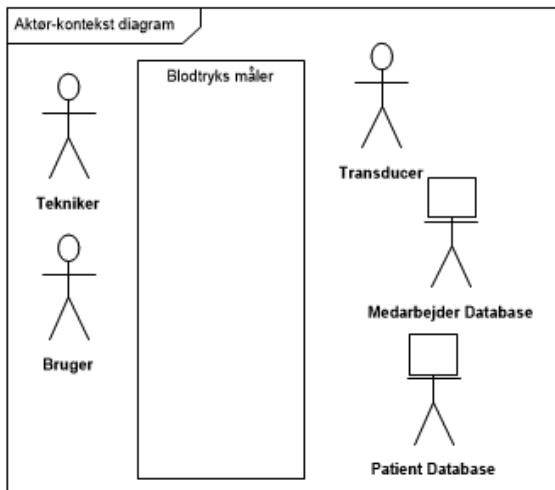

Figur 2.1: Aktør-kontekst diagram

### 2.2.2 Aktørbeskrivelse

Aktørnavn	Type	Beskrivelse
Bruger	Primær	Brugeren er den aktør der foretager blodtryksmålingerne. Brugeren er en person der har kendskab til systemet, samt tilladelse til at benytte systemet. Fx en læge, anestesi sygeplejerske
Tekniker	Primær	Tekniker er den aktør der foretager den årlige kalibrering af systemet. Teknikeren er en person der har kendskab til den tekniske del af systemet. Fx. medicotekniker på et sygehus
Transducer	Sekundær	Det er tranduceren, der leverer blodtryksmålingen til systemet
Medarbejder database	Sekundær	Medarbejder databasen er det sted, hvor medarbejderens log ind valideres
Pateint database	Sekundær	Patient databasen er det sted, hvor blodtryksmålingens data gemmes og patientens CPR nummer valideres

*Tabel 2.2: Aktørbeskrivelse*

## 2.3 Use cases

### 2.3.1 Use case diagram



Figur 2.2: Use case diagram

### 2.3.2 Use case 1

#### Use Case 1

---

Navn	Kalibrer system
Use case ID	1
Samtidige forløb	1
Primær aktør	Tekniker
Initialisere	Tekniker
Mål	Tekniker ønsker at foretage kalibrering
Forudsætninger	
Resultat	Systemet er kalibreret

---

Hovedforløb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekniker påtrykker systemet tre kendte tryk</li> <li>2. Tekniker aflæser responserne</li> <li>3. Tekniker noterer afvigelser fra de kendte tryk [3.a <i>Der er ingen afvigelser</i>]</li> <li>4. Tekniker kalibrerer afvigelsen</li> </ol>
Undtagelser	3.a Use case afsluttes

---

*Tabel 2.3: Fully dressed Use Case 1*

### 2.3.3 Use case 2

#### Use Case 2

---

Navn	Opstart system
Use case ID	2
Samtidige forløb	1
Primær aktør	Brugeren
Sekundær aktør	Database
Initialisere	Brugeren
Mål	Systemet er opstartet
Forudsætninger	Use case 1 er gennemført.
Resultat	Systemet er nulpunktsjusteret og brugeren er klar til at blive forbundet til systemet

---

Hovedforløb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brugeren indtaster login-oplysninger og trykker på "Log ind"-knappen. Systemet tjekker i databasen om oplysninger er gyldige [1.a <i>Forkert login</i>]</li> <li>2. Brugeren trykker på "nulstil"-knappen. Systemet laver nulpunkts justering</li> </ol>
Undtagelser	1a. Besked om forkert login vises. Use Case fortsættes fra punkt 1

---

*Tabel 2.4: Fully dressed Use Case 2*

### 2.3.4 Use case 3

**Use Case 3**


---

Navn	Mål blodtryk
Use case ID	3
Samtidige forløb	1
Primær aktør	Brugeren
Initialisere	Brugeren
Mål	Blodtryksmåling kører
Forudsætninger	UC2 er gennemført
Resultat	Blodtrykket vises i kontinuerlig graf, systolisk og diastoliske blodtryk vises grafisk, samt puls vises grafisk
Hovedforløb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brugeren trykker på "start"-knappen i blodtryksvindue</li> <li>2. Transduceren mäter blodtryk</li> <li>3. Systemet modtager blodtryksmåling fra transduceren</li> <li>4. Blodtrykgraf, systolisk, diastolisk og puls vises grafisk i blodtryksvinduet</li> </ol>
Undtagelser	

---

*Tabel 2.5: Fully dressed Use Case 3***2.3.5 Use case 4****Use Case 4**


---

Navn	Filtrer signal
Use case ID	4
Samtidige forløb	2
Primær aktør	Brugeren
Initialisere	Brugeren
Mål	Brugeren ønsker at foretage en digital filtrering
Forudsætninger	UC2 er gennemført
Resultat	Det filtrerede signal vises i blodtryksgrafen
Hovedforløb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brugeren trykker på "Til"-knappen under filtrer</li> </ol>

---

- 
2. Systemet filtrerer signalet
  3. Det filtrerede signal vises i blodtryks vindue
- 

Undtagelser

---

*Tabel 2.6: Fully dressed Use Case 4*

### 2.3.6 Use case 5

#### Use Case 5

---

Navn	Alarmer bruger
Use case ID	5
Samtidige forløb	2
Primær aktør	Brugeren
Initialisere	Brugeren
Mål	Systemet kan alarmere bruger ved for højt/lavt blodtryk
Forudsætninger	UC2 er gennemført
Resultat	Systemet alarmerer bruger
Hovedforløb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brugeren tilpasser diastoliske og systoliske grænseværdier ud fra patientens blodtryk</li> <li>2. Systemet tjekker om grænseværdier er overskredet</li> <li>3. Målte blodtryk overskrider valgte grænseværdier [3.a <i>Målte blodtryk overskrider ikke valgte grænseværdier</i>]</li> <li>4. Alarm startes [4.a <i>Bruger udskyder alarm</i>]</li> </ol>
Undtagelser	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.a Use case fortsættes fra punkt 2</li> <li>4.a Alarm udskydes med 3 minutter og use case starter fra punkt 2 igen</li> </ol>

---

*Tabel 2.7: Fully dressed Use Case 5*

### 2.3.7 Use case 6

#### Use Case 6

---

Navn	Gem måling
Use case ID	6
Samtidige forløb	1
Primær aktør	Brugeren
Mål	Brugeren ønsker at afslutte systemet og gemme måling
Forudsætninger	UC3 er gennemført
Resultat	Blodtryksmålingens data er gemt i database og bruger er logget ud af systemet
Hovedforløb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brugeren trykker på "Gem og afslut"-knappen. "Gemme"-vindue åbnes. [1.a <i>Bruger ønsker ikke at afslutte</i>]</li> <li>2. Brugeren indtaster CPR-nr og trykker på "Gem"-knappen [2.a <i>CPR-nr er ikke gyldigt</i>]</li> <li>3. Besked om at data er gemt vises. Brugeren trykker på "Ok"-knappen. Systemet logger ud og afsluttes</li> </ol>
Undtagelser	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.a. Bruger trykker på "Annuler"-knappen. Systemet lukker "Gemme"-vinduet ned</li> <li>2.a. Besked om at CPR-nummer ikke gyldigt, vises. Nyt CPR-nummer indtastet. Use Case fortsættes med punkt 2</li> </ol>

Tabel 2.8: Fully dressed Use Case 6

## 2.4 Ikke-funktionelle krav

### 2.4.1 (F)URPS+

MoSCow er angivet i parentes ved hhv. M, S, C og/eller W, for Must, Should, Could og Won't

#### Functionality

1. (M) Brugeren skal kunne starte en ny måling indenfor XX sekunder efter opstart af programmet
2. (M) Systemet skal kunne kalibrere blodtrykssignalet

3. (M) Systemet skal kunne foretage en nulpunktsjustering
4. (M) Systemet skal kunne forstærke signalet fra transduceren 400 gange
5. (M) Systemet skal kunne filtrere signalet med det indbyggede analoge antialiaserings filter med en båndbredde på 50 Hz, samt en cut-off frekvens ved 50 Hz
6. (M) Programmet skal kunne vise blodtrykket som funktion af tiden
7. (M) Programmet skal kunne vise blodtrykssignalet kontinuert
8. (M) Programmet skal programmeres i C#
9. (M) Programmet skal kunne lagre de målte data i en database
10. (M) Programmet skal kunne filtrere blodtrykket via et digitalt filter
11. (S) Programmet bør kunne afbildede både systolisk og diastolisk blodtryk med tal
12. (S) Programmet bør kunne måle puls
13. (C) Programmet kan angive pulsslag med bip-lyde med varighed af 100ms og en frekvens på 850 Hz

## Usability

1. (M) Blodtrykstallene der udskrives på brugergrænsefladen er røde
2. (S) Pulsmålingen burde kunne udskrives på brugergrænsefladen med grønne tal
3. (M) Brugeren skal kunne starte en måling maksimalt 20 sekunder efter opstart  
Knapper??  
Billede af brugergrænsefladen indsættes

## Reliability

1. (M) Systemet skal kunne køre uden fejl i et år
2. (M) Systemet skal have en ”mean time to restore” på højest 24 timer
3. Systemet får herved en tilgængelighed beregnet ved

$$\text{Availability} = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}} = \frac{365}{365 + 1} = 0,997 = 99,7\% \quad (2.1)$$

## Performance

1. (S) Systemet bør kunne gemme data på 5 sekunder +/-10%

## Supportability

1. (M) Softwaren er opbygget af trelagsmodellen



# Design 3


Version   Dato   Ansvarlig   Beskrivelse

## 3.1 Indledning

Formålet med design afsnittet er at beskrive hardwaren og softwaren for blodtryksmåler-systemet. Systemet beskrives ved hjælp af udregninger, diagrammer, figurer og skitser som tydeliggører, hvordan de forskellige delelementers funktionalitet er, samt hvilke tanker der ligger til grund for den endelige implementering (se afsnit 3.3 for hardware og afsnit 3.5 for software).

## 3.2 Hardware arkitektur

I følgende afsnit beskrives hvordan blodtryksmåler systemet og dets delkomponenters opbygning.

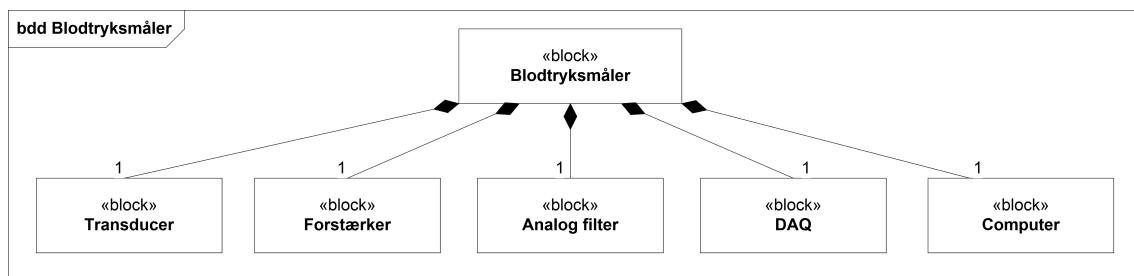

Figur 3.1: Blokdiagram for blodtryksmåler systemet.

Ud af blokdiagrammet, figur 3.1, kan man se at blodtryksmåler systemet består af en transducer, en forstærker, et analogt filter, en DAQ og en computer.




Figur 3.2: Internt blok diagram for blodtryksmåler systemet.

Ud af det interne blokdiagram, figur 3.2, kan ses det at blodtrykket i form af det målte tryk kommer ind i transduceren. Transduceren som omformer det målte tryk til et spændingssignal, sender signalet vidre til forstærkeren. Fra forstærkeren sendes signalet over i det analoge filter og derfra ind i DAQ'en. Endeligt sendes det digitale signal fra DAQ'en over i en computer, der fortolker signalet som et billede, der vises til omverdenen.

### 3.2.1 Design af forstærker

Forstærkeren er designet med tanke på, at det er meget små spændinger der arbejdes med. Grundet dette, er en almindelig operationsforstærker fravalgt, da dens reelle indgangsimpedans ikke er for lav. En Instrumentationsforstærkers indgangsimpedans i den virkelige verden, er højere, og den kan dermed opfange meget små signaler, som f.eks. blodtryk, der opererer i millivolt..

Vejleder rådede herefter til at projektgruppen brugte instrumentationsforstærkeren INA114. Forstærkerens design er valgt ud fra instrumenteringsforstærkerens datasheet's forslag, og kan ses på figur 3.3.

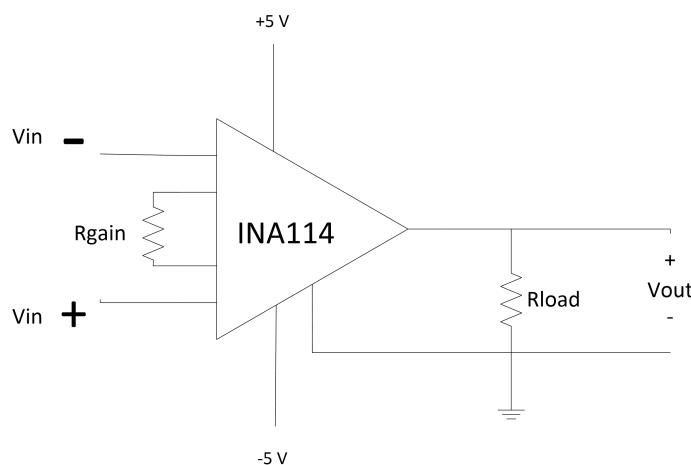

Figur 3.3: Der overordnede design af forstærkeren.

$R_{gain}$  er modstanden, som bestemmer, hvor meget forstærkning, instrumentationsforstærkeren skal give og  $R_{load}$  er den belastning, der kommer efter kredsløbet. I dette tilfælde, er det, det analoge filter. For at finde  $R_{gain}$ 's størrelse, kræver det, at der vides, hvor meget forstærkning der er brug for. Dette findes, ved at bestemme den maksimale spænding, som transduceren kan give, i en blodtrykssituation. Dette regnestykke kan ses realiseret i ligning 3.1:

$$VT_{max} = T_{max} \cdot V_{max} \cdot HG_{max} = \frac{\mu V}{V/mmHG} \cdot 5V \cdot 250mmHg = 6,25mV \quad (3.1)$$

Spændingen ønskes at skaleres op til DAQ'ens dynamikområde, som ligger omkring 2,5V. Forstærkningsfaktoren udregnes ved simpel brøkregning, som ses på ligning 3.2:

$$G = \frac{2,5}{6,25 \cdot 10^{-3}} = 400 \quad (3.2)$$

INA114's datasheet giver en ligning for udregning af forstærkning. Da forstærkningen er kendt, omskrives ligning 3.3, så modstanden  $R_{gain}$ 's værdi i stedet bestemmes:

$$Gain = 1 + \frac{50k\Omega}{R_{gain}} \rightarrow G - 1 = \frac{50k\Omega}{R_{gain}} \rightarrow \frac{50kOhm}{G - 1} = R_{gain} \quad (3.3)$$

Herefter kan den ohmske værdi af  $R_{gain}$  bestemmes, hvilket sker i ligning 3.4:

$$R_{gain} = \frac{50k\Omega}{400 - 1} = 125,31\Omega \quad (3.4)$$

### 3.2.2 Design af analogfilter

Filteret, som ses på figur 3.4, skulle realiseres som et aktivt 2. ordens lavpasfilter af typen Sallen-Key med unity gain, med båndbredde på 50 Hz (se 3.4). Desuden skulle filteret yderligere designes som et Butterworth filter med cut off frekvens på 50 Hz. C2 skulle vælges til at være 680 nF og gruppen fik desuden at vide, at R1 skulle være lig med R2. Operationsforstærkeren blev opgivet til at være af typen OP27.



Figur 3.4: Unity gain 2. ordens Sallen-Key lavpas konfiguration

Et Sallen-Keyfilter har en dæmpningsfaktor på 0,7, fordi at der, i et Sallen-Key filter, er blevet prioriteret et fladt frkvensområde, frem for hurtig dæmpning. Gruppen brugte en hjemmeside<sup>1</sup> som hjælpemiddel til at finde overføringsfunktionen for Sallen-Key lavpasfilteret. Denne ligning kan ses i ligning 3.5:

$$\frac{V_{out}(S)}{V_{in}(S)} = \frac{\frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2}}{s^2 + s(\frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1}{R_1 C_2}) + \frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2}} \quad (3.5)$$

Da det er blevet opgivet at  $R_1 = R_2$ , kan overføringsfunktionen forkortes, som set på ligning 3.6.

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{\frac{1}{R^2 C_1 C_2}}{s^2 + s(\frac{2}{RC_2}) + \frac{1}{R^2 C_1 C_2}} \quad (3.6)$$

Dernæst sammenlignes med standardformlen for overføringsfunktionen for et andet ordens filter på figur 3.7;

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{\frac{1}{R^2 C_1 C_2}}{s^2 + s(\frac{2}{RC_2}) + \frac{1}{R^2 C_1 C_2}} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + s(2\zeta\omega_0) + \omega_0^2} \quad (3.7)$$

Ud fra dette kan regnes komponentværdierne for R, idet vi har en opgivet værdi for  $\frac{2}{RC_2}$ , som vist på figur 3.8

$$\frac{2}{RC_2} = 2\zeta\omega_0 \quad (3.8)$$

<sup>1</sup><http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiLowkeisan.htm>

Gruppen brugte herefter MathCad til at isolere R, og herefter udregne værdien af denne. Dette kan ses på figur 3.9

$$\frac{2}{R \cdot 680 \cdot 10^{-9}} = 2 \cdot 0.7 \cdot (50 \cdot 2 \cdot \pi) \text{ solve}, R \rightarrow \frac{250000}{17 \cdot \pi} = 6.687 \times 10^3 \quad (3.9)$$


Dernæst kan komponentværdien for C1 udregnes, da gruppen nu havde en formel, men en ubekendt.

$$\frac{1}{R^2 C_1 C_2} = \omega_0^2$$

Ved hjælp af MathCAD isoleres C1.

$$\frac{1}{(6.687 \times 10^3)^2 \cdot (680 \cdot 10^{-9}) \cdot C_1} = (50 \cdot 2\pi)^2 \text{ solve}, R \rightarrow 333,2 \times 10^{-9} \quad (3.10)$$

Derved er komponentværdierne for kredsløbet fundet og de ses indskrevet på 3.4.

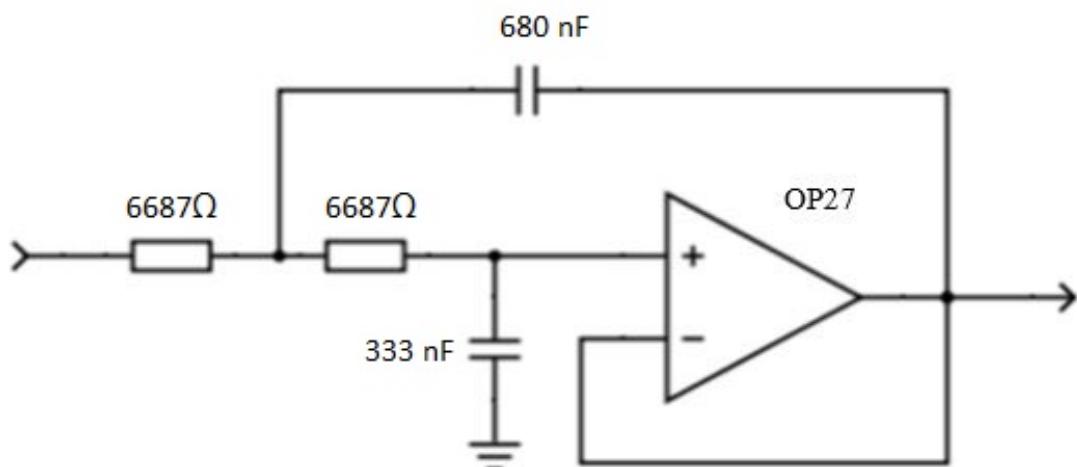


Figur 3.5: Unity gain 2. ordens Sallen-Key lavpas konfiguration med indsatte komponentværdier.

For at underbygge gruppens teori omkring filteret, blev der ved hjælp af toollet "Sallen-Key Low-pass Filter Design Tool"<sup>2</sup> udarbejdet et bodeplot. Dette kan ses nedefor på figur 3.6.

---

<sup>2</sup><http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiLowkeisan.htm>

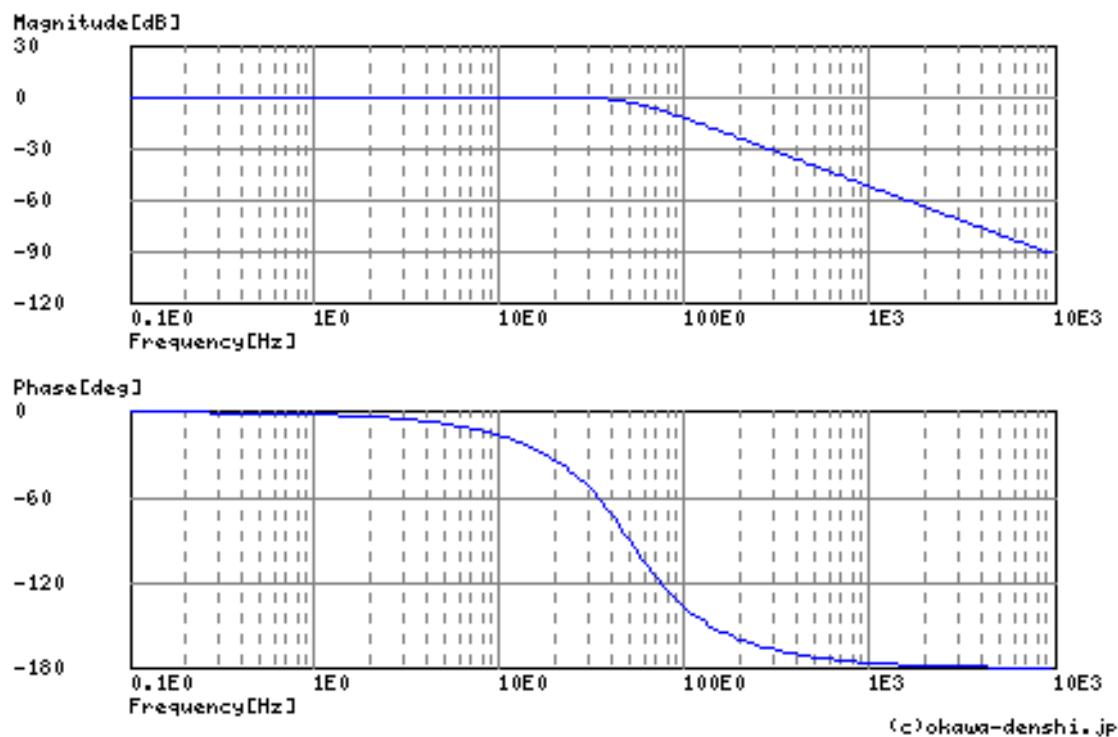Figur 3.6: Bodeplot af overføringsfunktionen<sup>3</sup>

### 3.2.3 Grænseflader


Navn	Input	Output	Interval	Beskrivelse
Transducer	Tryk	Spænding	Ind; -50 mmHg Ud; 0 til 6,25 mV	Transduceren, i form af en straingauge, reagerer i forhold til trykændringer, og udsender en spænding, som ændrer sig i forhold til tryk.
Forstærker	Spænding	Spænding	Ind; 0 til 6,25 mV Ud; -2,5V til 2,5V	Forstærkeren modtager det svage signal fra transduceren, og forstærker signalet op, så det matcher DAQ'ens dynamikområde.
Filter	Spænding	Analogt Signal	Ind; -2,5V til 2,5V Ud; -2,5V til 2,5V	Filteret modtager det forstærkede signal fra forstærkeren, og filtrerer signalet.
DAQ	Analogt Signal	Digitalt Signal	Ind; -2,5V til 2,5V Ud; -2,5V til 2,5V	DAQ'en konverterer det analoge signal fra filteret, om til et digitalt signal, som computeren modtager
Computer	Digitalt Signal	Grafisk Billede		Computeren modtager et digitalt signal fra DAQ'en, som bliver behandlet i koden.

Tabel 3.2: Grænsefladetabel

<sup>3</sup> <http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiLowkeisan.htm>

### 3.3 Hardware implementering

Efter teorifasen var ovre, blev de to blokke bygget op. Gruppen valgte at bygge forstærkeren og filteret på hver sit fumlebræt, dels på grund af pladsmangel og dels på grund af større sammenhæng mellem arkitekturen, og det endelige produkt.

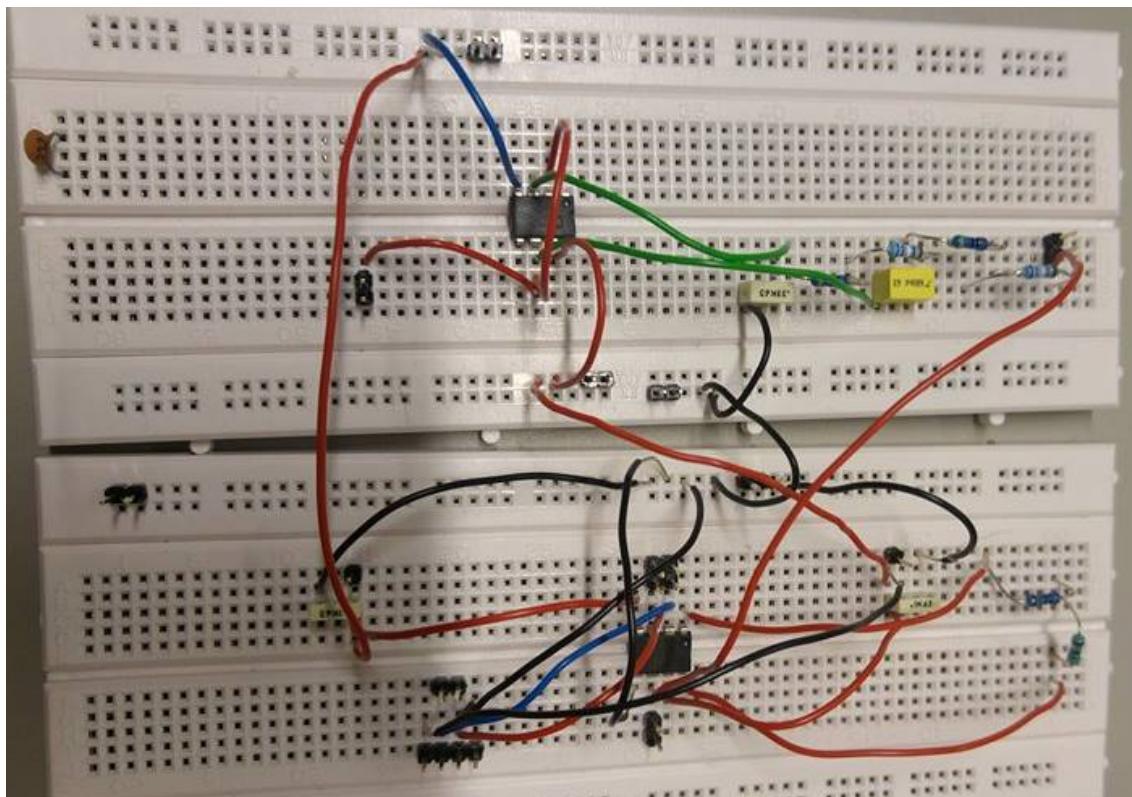

Figur 3.7: Opstilling af forstærker og filter

Grundet mangel på præcise modstande, bedømte gruppen at det var bedst at bygge modstandende i forholdsvis filteret og forstærkeren, op i to, så gruppen kunne komme så tæt på den ønskede modstandsværdi som muligt.

#### Hardware overvejelser

I udviklingen af hardwaren, stødte gruppen på problematikker, som blev gjorde, at der var nogen komponenter, der blev nødt til at blive taget op til genovervejelse.

Et af de største problemer gruppen stødte ind i, i forhold til hardware, var brugen af en operationsforstærker i forstærkerblokken. En reel operationsforstærker har ikke en uendelig indgangs modstand, som i den ideelle verden, og der er derfor en risiko for at den lave spænding fra transduceren simpelthen ikke ville kunne passere forstærkeren. Gruppen valgte derfor at bruge en instrumenteringsforstærker i stedet, da den reelle komponents egenskaber ligger langt tættere på dens ideelle modpart, og derfor var bedre egnet i gruppens kredsløb. En anden fordel ved instrumenteringsforstærkeren er, at den er meget let

at justere gain på.

En anden stor fordel ved instrumenteringsforstærkeren er, at common mode rejection er meget god. Common mode noise er støj, fra det omkringliggende miljø. Da en instrumenteringsforstærkers forstærkning kommer fra forskellen mellem dens to indgange, så kan støj påvirke forstærkningen, især når der arbejdes med så lave forstærkninger, som dem, der kommer fra transduceren. Ofte er der dog støj på begge indgange, og i den ideelle verden ville dette ikke påvirke forstærkningen. I den reelle verden kan støjen dog også ende med at blive forstærket. Common mode rejection beskriver hvor god en komponent er, til at sortere dette støj fra. Den brugte instrumenteringsforstærker har en common mode rejection på 120 dB, hvilket vurderes til en rimelig værdi.

En anden ting ved forstærkeren, som blev nødt til at blive ændret, var det dynamik område, som skulle udnyttes. Oprindeligt havde gruppen bestemt, at det filtrerede signal skulle ligge imellem -5V til +5V. Grundet en forstærkers manglende evne til at forstærke et signal op til dens forsyningsspænding, så blev gruppen nødt til at nedsætte signalområdet til -2,5V til +2,5V. Det var muligt at forstærke signalet yderligere, men grænsen blev sat til denne værdi, fordi signalområdet matcher et dynamikområde på AD konverteren.

Designet af filteret, lå fast på forhånd, og der var derfor ikke meget der kunne ændres i dette. Operationsforstærkeren var oplyst til at skulle være af typen OP27G, da denne ligeført har en god common mode rejection. Grundet mangel på præcise komponenter, har gruppen sat to modstande i serie, for at komme så tæt på den udregnede værdi, som muligt.

Gruppen valgte desuden at systemet skulle forsynes af Analog Discovery, frem for et batteri. Dette skyldes at Analog Discovery giver en stabil strøm, som ikke har brug for at blive afbalanceret af en spændingsudligner. Gruppen vurderede at usikkerhederne ville udligne hinanden, og så flere fordele ved at bruge Analog Discovery.

### Implementering af forstærkeren

Den samlede stykliste for forstærkeren blev vist som på tabel 3.3.

Komponent	Antal	Type
Modstand	1	$120 \Omega$
Modstand	1	$4.8 \Omega$
Kondensator	2	$100 \text{ nF}$
Instrumentationsforstærker	1	INA114

Tabel 3.3: Forstærkertabel

For forstærkeren gælder det at den beregnede  $R_{gain}$  er  $125,31\Omega$  som det kan ses ud af komponentlisten består  $R_{gain}$  i praksis af to modstande på henholdsvis  $4,8\Omega$  og  $120\Omega$  som er sat i serie.  $R_{gain}$  modstanden er i praksis  $124,8\Omega$ . I praksis er  $R_{gain}$   $0,51\Omega$  mindre end den i teorien skulle have været.

### Implementering af filteret

Den samlede stykliste for filteret blev som vist på tabel 3.4.

Komponent	Antal	Type
Modstand	2	6.2 k $\Omega$
Modstand	2	470 $\Omega$
Kondensator	1	680 nF
Kondensator	1	330 nF
Operationsforstærker	1	OP27G

Tabel 3.4: Filtertabel

Det analoge filter består blandt andet af en 330 nF kondensator,  $C_1$ , som i teorien er beregnet til at skulle have været 333,2 nF. I praksis er kondensatoren  $C_1$  3,2 nF mindre end den i teorien er beregnet til at skulle have været. Filteret består desuden af to modstande  $R_1$  og  $R_2$  som er identiske. I det realiserede analoge filter består hver modstand af to modstande på henholdsvis 6200 $\Omega$  og 470 $\Omega$  som er sat i serie. Dermed er både  $R_1$  og  $R_2$  6670 $\Omega$  i praksis. I teorien var  $R_1$  og  $R_2$  udregnet til at skulle være 6687 $\Omega$ . I praksis er der derfor 17 $\Omega$  mindre end teorien foreskriver.

Generelt er der valgt at se bort fra de afvigelser, der er for komponentværdierne i praksis sammenlignet med de i teorien beregnet. Det er valgt da afvigelserne er relativt små i forhold til det pågældende komponent. For modstandene er der desuden 1 procents usikkerhed, hvilket betyder man alligevel ikke kan være helt sikker på komponentværdien.

På baggrund af de i praksis anvendte komponenter er den reelle knækfrekvens for det analoge filter beregnet. Til det formål er formlen som set på figur ?? anvendt.

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1C_1R_2C_2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{6687 \cdot 333,2 \times 10^{-9} \cdot 6687 \cdot 680 \times 10^{-9}}} = 50,37 Hz \quad (3.11)$$

Desuden er den reelle  $\zeta$  for dette filter, ifølge Okawadensi, 0,697.

## 3.4 Software arkitektur

### 3.4.1 GUI

Dette afsnit beskriver hvilke tanker og overvejelser der er gjort i forbindelse med designet af diverse brugergrænseflader. Nedenfor ses udkast til disse brugergrænseflader. Den endelige udgave af brugergrænseflader kan ses i afsnit 3.5.


Til designet af brugergrænsefladen er blevet udført ud fra de 16 principper <sup>4</sup> for gode

<sup>4</sup> [https://en.wikibooks.org/wiki/Usability\\_for\\_Nerds](https://en.wikibooks.org/wiki/Usability_for_Nerds)

brugergrænseflader. Der er ligeledes i form1 hentet inspiration fra allerede eksisterende blodtryk monitor. I designet af brugergrænsefladen bestræbes, der efter at gøre det så virkelighedsnært som muligt ud fra de redskaber og oplysninger der er til rådighed.

Brugergrænsefladen er inddelt i 3 forskellige interfaces. De 3 interfaces er henholdsvis Log ind, Form1 og Gem. De personer, der interagerer med brugergrænsefladen er sundhedsfagligt personale som typisk vil være en læge eller sygeplejerske. Dette er der også taget højde for i designet da, der aldrig vil være andre end det sundhedsfaglige personale der interagerer med brugergrænsefladen og derfor er den en skærpet målgruppe.

Nedenfor kommer der en uddybende beskrivelse af brugergrænsefladen.

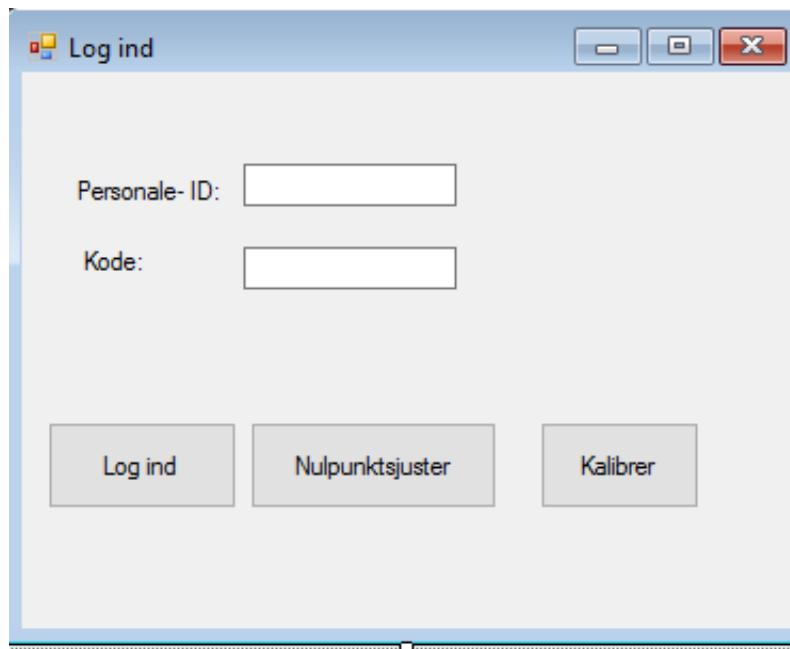

Figur 3.8: Login vindue

I figur 3.8 er der tage udgangspunkt i, at brugergrænsefalden skal være enkel og overskuelig opbygget. Der skal ikke være nogle overflødige ting og de knapper der er vigtige som bruger skal benytte skal stå tydeligt frem. Opbygningen skal afspejle brugerens logik.

Tankerne omkring den enkle opbygning er, at hvis der opstår en akut situation hvor systemet skal i gang hurtigt skal det være nemt og hurtigt at logge ind i systemet. Det er vigtigt at knapperne er selvforklarende og giver brugeren det der forventes af knappen når den benyttes.

Der er taget højde for feedback til bruger ved forkert log ind får brugeren en besked om at log ind er indtastet forkert og der skal prøves forfra.



Figur 3.9: Kalibrer vindue


Vist på figur 3.9, hvor der her er lagt vægt på det funktionelle, med et enkelt og simpelt design. Der er vejledende tekst, som gør det nemt for aktøren at finde ud af systemet.



Figur 3.10: Blodtryk vindue

I blodtryksvinduet, vist på figur 3.10, er opbygningen mere kompliceret og med flere knapper end ved Log ind og Gem. Der er taget højde for at knapperne er selvforsklarende og deres navne afspejler de bagvedliggende handlinger. Dette medfører at brugeren stadig har

et overblik over brugergrænsefalden og stadig selv kan kontrollerer hvad der skal ske. Denne brugergrænseflade er ikke tiltænkt nye brugere, men derimod brugere der har et kendskab til den og til hvilke sundhedfaglige værdier og udtryk, der vises på den. Derfor benyttes brugerens sprog på brugergrænsefalden og ikke et sprog med termer, der er forståelig for alle.

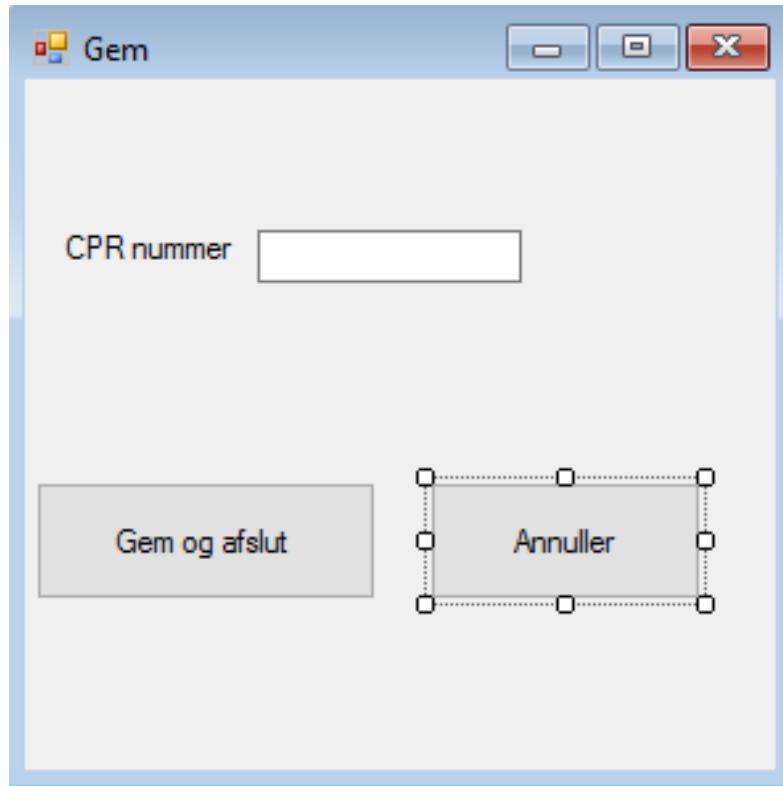


Figur 3.11: Gem vindue

På figur 3.11, gemme-vinduet, er der igen taget udgangspunkt i en enkel opbygning og at knapperne, der skal bruges er tydelige og selvforklarende. Det er her også brugerens logik, der afspejles og ingen unødvendige ting er inddraget i brugergrænsefalden. Det er her muligt at afbryde situationen ved at der er en alternativ udvej, som kan bruges hvis den op startet handling fortrydes. Der er taget højde for feedback til brugeren hvis der indtastes forkert CPR nummer får brugeren det af vide i et pop-up vindue.

### 3.4.2 Domænemodel

Diagrammet viser en domæne model for blodtryks systemet. Dette diagram giver et godt overblik over systemet som helhed og hvilke elementer, der indgår i systemet. Diagrammet viser hvordan brugeren interagerer med systemet og hvordan systemet forløber efter det igangsættes af bruger.

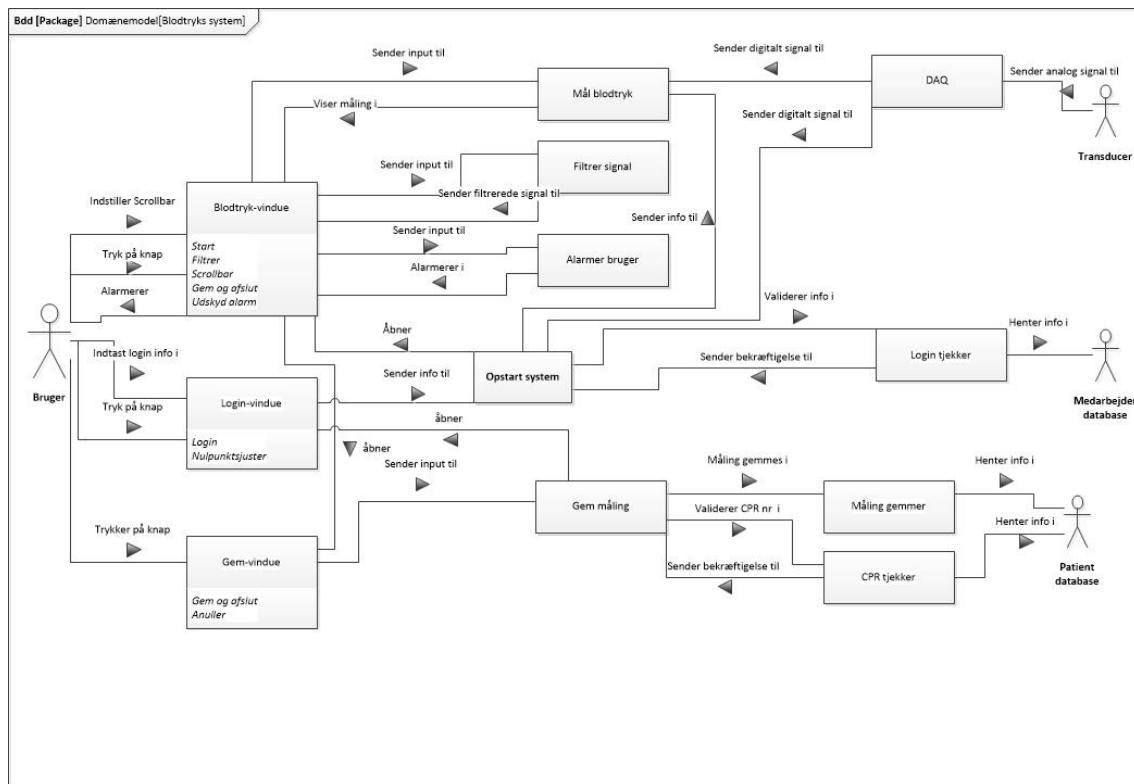

Figur 3.12: Domænemodel

### 3.4.3 Applikationsmodel


Applikationsmodellen er en model der på baggrund af domænemodel og Use cases udarbejdes software relaterede klasse applikationsmodeller, sekvensdiagrammer og opdaterede klasse applikationsmodeller.

Her er det ikke-opdateret klassediagram udeladt, hvorfor sekvensdiagram og opdaterede klasse applikationsmodel er udarbejdet på baggrund af fiktive metoder. De faktiske metoder kan ses i afsnit 3.5.1.

### Sekvensdiagram


Sekvensdiagrammet er et interaktions diagram, der viser hvordan processer i systemet forløber. Use casene ligger til baggrund for udarbejdelsen af sekvensdiagrammerne.

Der er blevet lavet et sekvensdiagram for hver use case for at give det bedste overblik over hver handling i forhold til systemet. I sekvensdiagrammet har vi brugt virtuelle metoder kald til at beskrive forløbet. I use case 2-7 er det brugeren, der interagerer med systemet og er initiator for de handlingerne bliver udført.

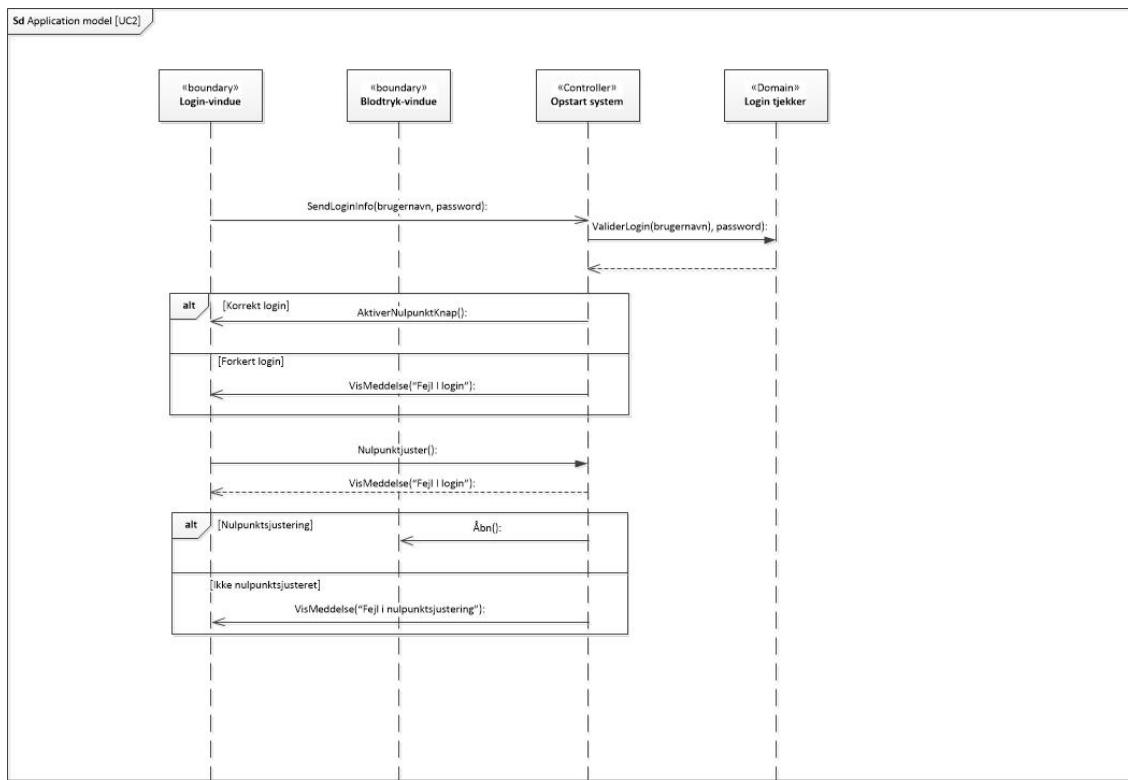

Figur 3.13: Sekvensdiagram UC2


På figur 3.13 ses det hvordan brugeren logger ind i systemet og hvordan brugeren for systemet nulpunktsjusterer. Det er brugeren, der interagerer med systemet og er initiatør for at handlingerne bliver udført.

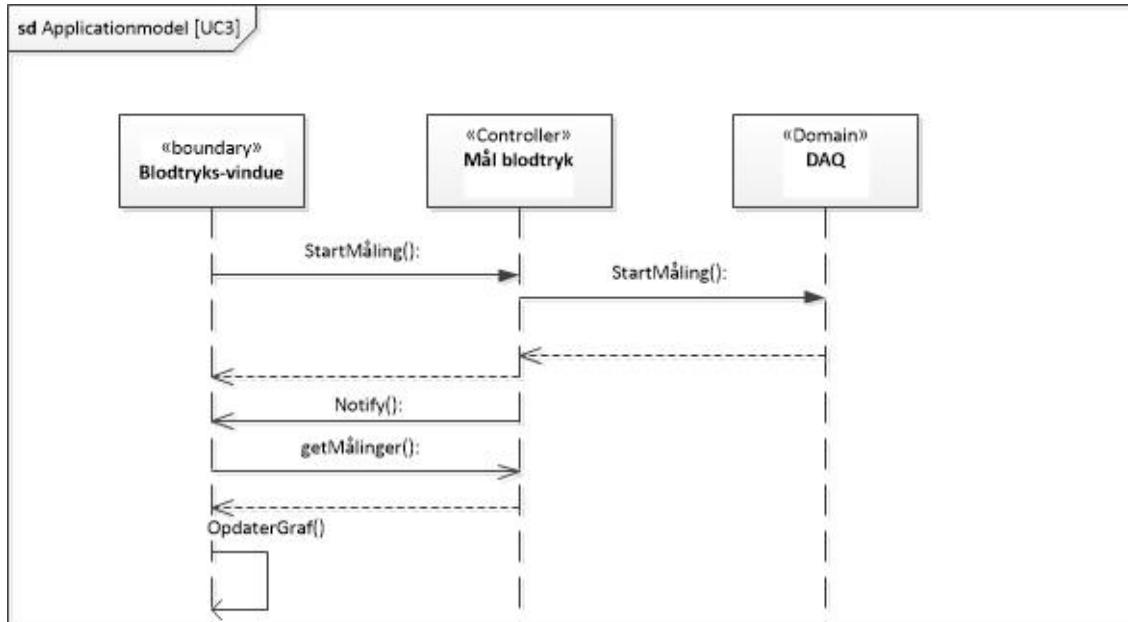

Figur 3.14: Sekvensdiagram UC3


Figur 3.14 viser hvordan brugeren starter målingen og hvordan graferne vises på

brugergrænsefalden.

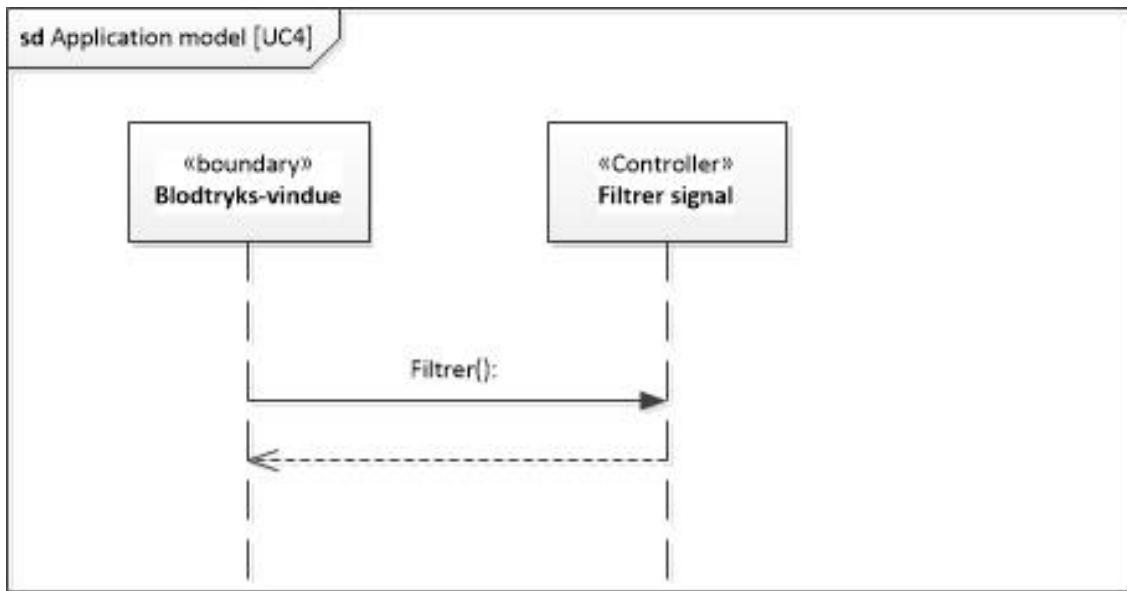


Figur 3.15: Sekvensdiagram UC4

I sekvensdiagrammet figur 3.15 ses hvordan brugeren kan vælge om blodtrykssignalet skal filtreres eller ej.

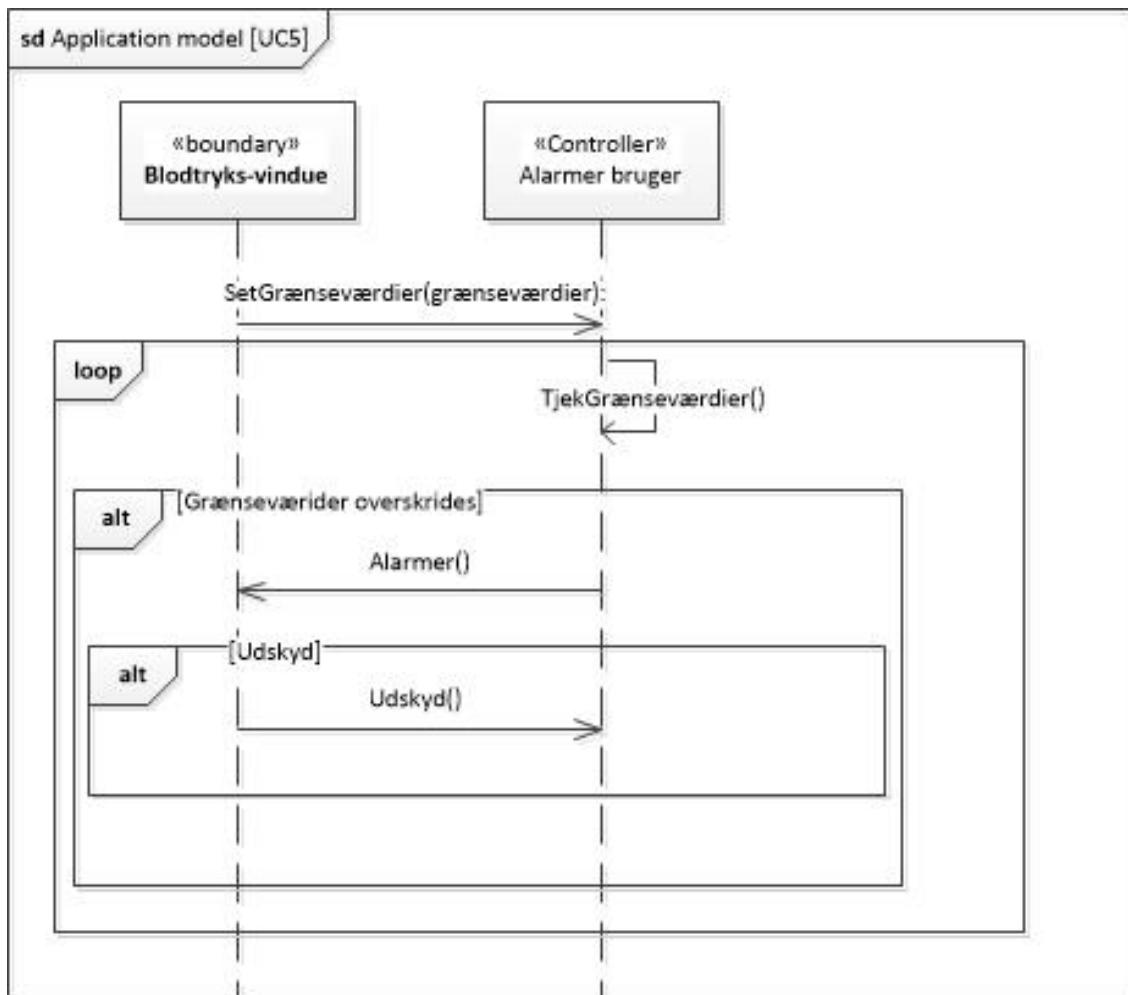

Figur 3.16: Sekvensdiagram UC5

Det ses på figur 3.16 hvordan brugeren justerer grænseværdierne for patientens blodtryk. Denne justering sker ud fra patientens målte blodtryk. De justerede grænseværdi ligger til grundlag for alarmen. Desuden viser figuren, at brugeren har mulighed for at udskyde alarmen.

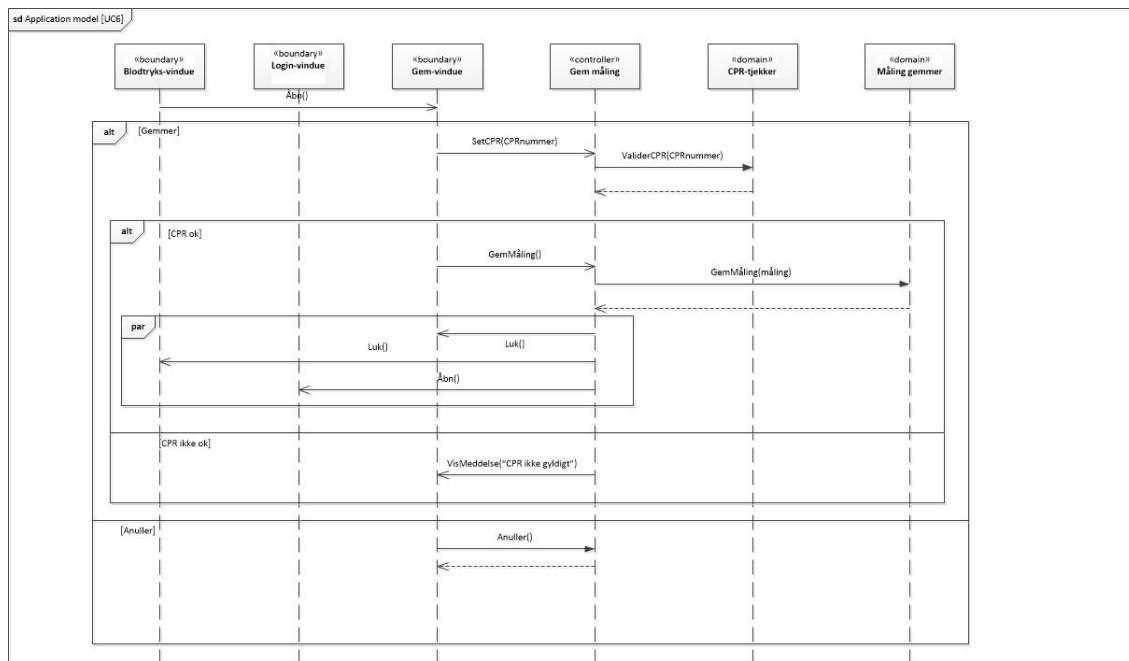


Figur 3.17: Sekvensdiagram UC6


Figur 3.17 viser hvordan systemet gemmer og afslutter en måling.

### Opdateret applikationsmodel


Klasse applikationsmodellerne er udarbejdet ud fra use casene, sekvensdiagrammer og domænemodellen. Der er ligesom ved sekvensdiagrammerne lavet et klassediagram for hver use case. Der er her også brugt virtuelle metoder.

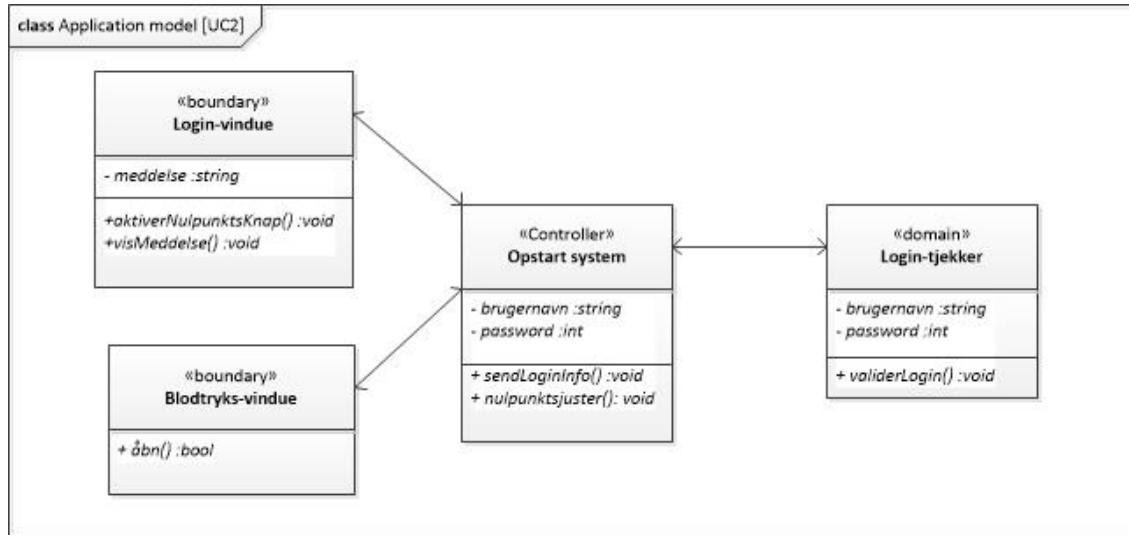


Figur 3.18: Klassediagram UC 2

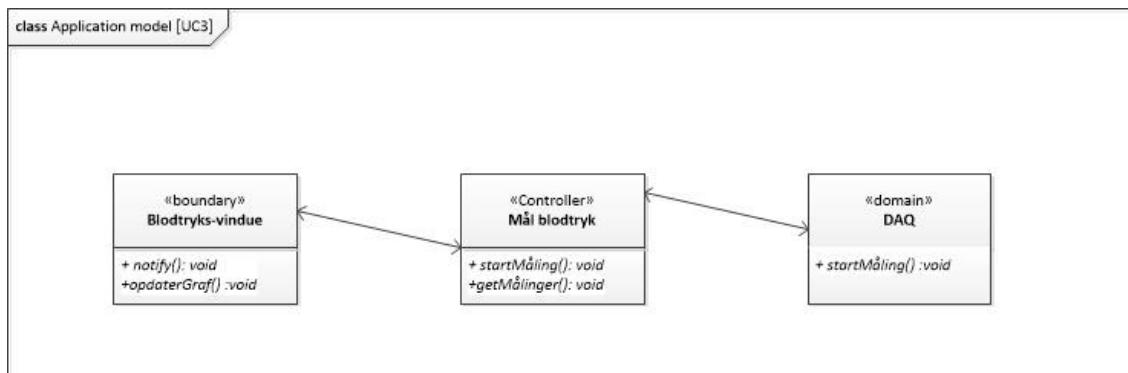


Figur 3.19: Klassediagram UC 3

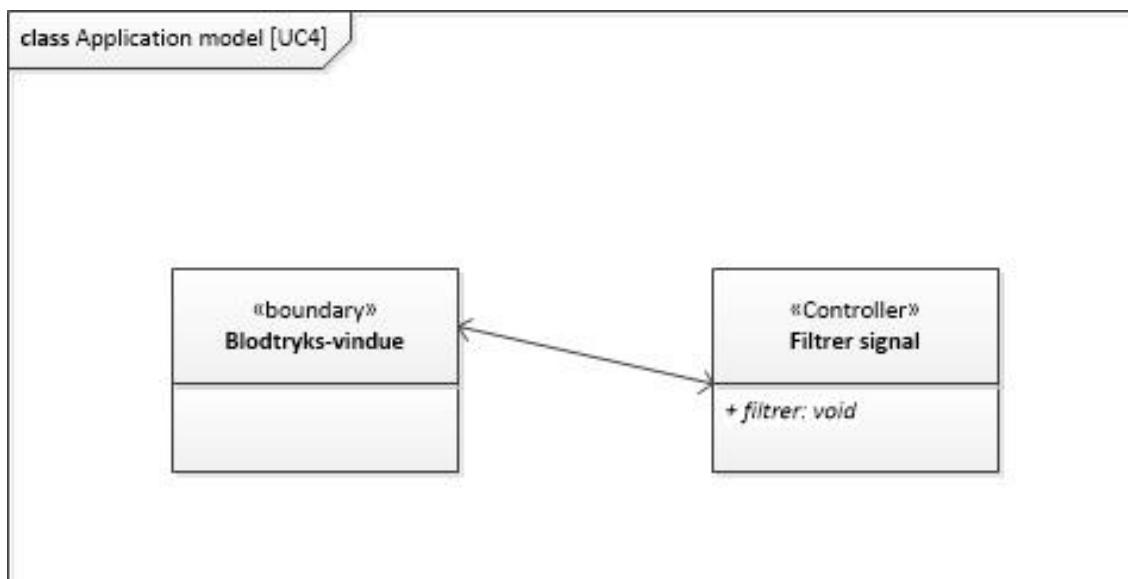

Figur 3.20: Klassediagram UC 4

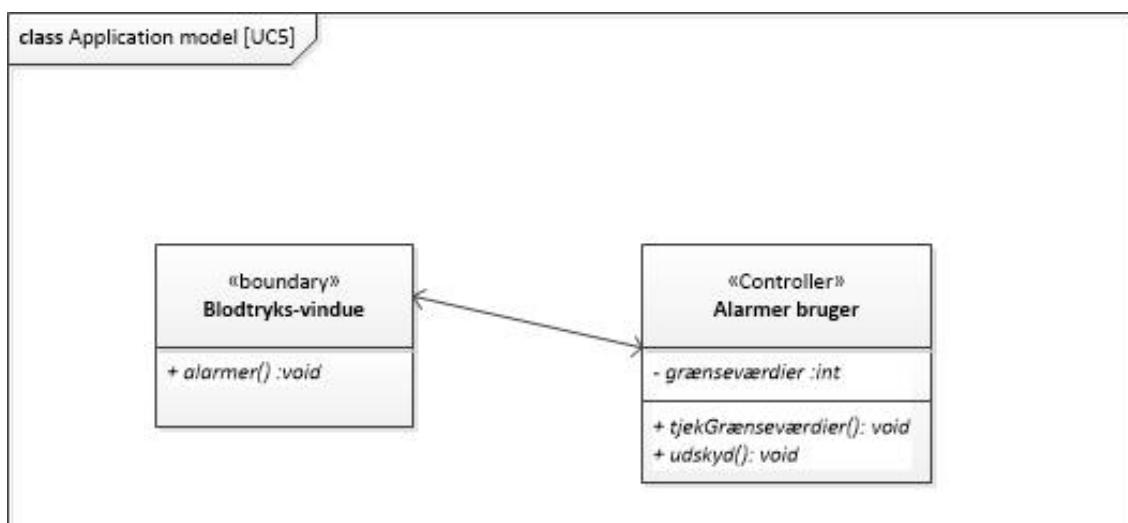

Figur 3.21: Klassediagram UC 5

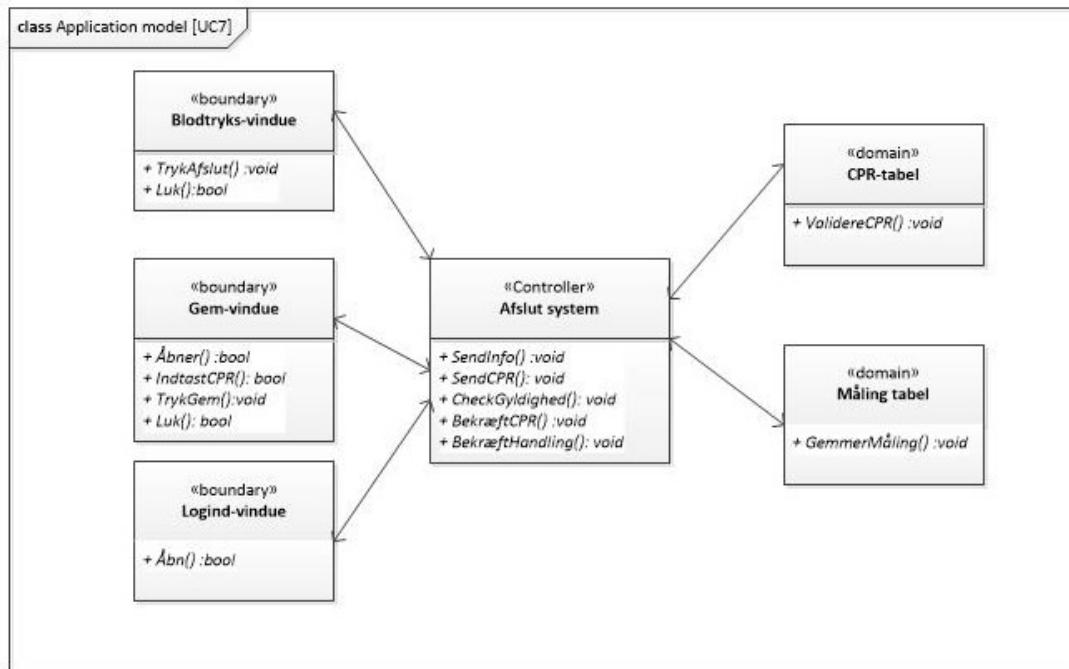

Figur 3.22: Klassediagram UC 7

## 3.5 Software implementering

### 3.5.1 UML klassediagram



# Test 4

---

Version	Dato	Ansvarlig	Beskrivelse
---------	------	-----------	-------------

---

## 4.1 Indledning

Test afsnittet giver en beskrivelse af hvilke test der løbende er blevet foretaget på både hardware og software. Testene består af modul/unit tests samt en mere omfattende integrationstest, hvor begge ligger til grund for den endelige accepttest (afsnit 5).

## 4.2 Modul/unit test


I dette afsnit testes enkelte delelementer af systemet uafhængigt af hinanden. Modultesten er til for at verificere de enkelte enheder virker efter hensigten.

### 4.2.1 Hardware

Til test af hardwaredelen blev der først udført modultest på henholdsvis forstærkeren og det analoge filter. Efterfølgende blev der udført integrationstest på forstærkeren og det analoge filter sat sammen med tryk transduceren. Sluttligt blev den samlede hardwaredel bestående af tryktransducer, forstærker og analogt filter testet på en vandsøjle.

#### 4.2.1.1 Modul test af forstærkeren

I modultesten af forstærkeren blev Analog Discovery brugt som spændingsforsyning og oscilloskop på to forskellige målepunkter placeret ved henholdsvis indgangs signalet og udgangssignalet. Da tryktransduceren forventes at have output spændinger i området 0 til 6,25 mV blev signalet fra transduceren simuleret ved en sinus på 1 Hz med et offset på 0. Den laveste amplitude for indgangs signalet var 1 mV. For hver måling blev amplituden for indgangs signalet sat op med 1 mV indtil den sidste måling hvor amplituden var nået op på 10 mV. Således blev der 10 forskellige målinger. Reelt set var det kun nødvendigt at teste op til 6 mV eller 7 mV, da det er herimellem, at man kan forvente et max tryk fra transduceren at ligge. Da der alligevel er taget målepunkter op til 10 mV skyldes det at der ved flere målinger kan laves en ”pænere” tendenslinje ved lineær regression.

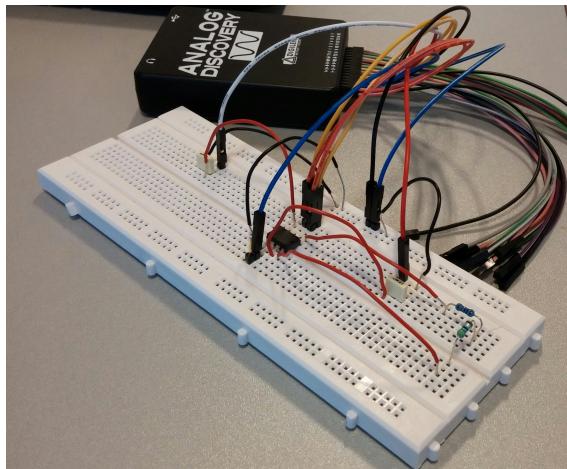

*Figur 4.1: Måleopstilling ved modul test af forstærkeren.*

Ud af målingerne blev der foretaget lineærregression over de 10 målepunkter. Tendenslinjen der kom ud af den lineæreregression blev som følger:

$$Y = 415,8 \cdot x - 0,09 \text{ hvor } R^2 = 0,99 \quad (4.1)$$

Her kan Y beskrives som værende forstærkningen ved en given frekvens. Konstanten 415,8 er den reelle forstærkning som er målt for forstærkeren. Skæringen med y-aksen burde være 0, men grundet måleusikkerheder er den blevet -0,09, hvilket også er acceptabelt. Den høje  $R^2$  værdi indikerer, at der er en tydelig lineær sammenhænge mellem den påtrykte spænding og spændingen af output, dvs. forstærkningen er lineær.


Senere påtryktes samme måleopstilling et DC-signal med amplituder startende fra 3mV op til 10 mV. Igen blev amplituden øget med 1 mV for hvert måling således, at der blev 7 målepunkter. Ved målinger foretaget på signaler med både 1 mV og 2 mV er offsettet i Analog Discovery så stort, at målingerne er umulige. Efter at have foretaget lineærregression på de 7 målepunkter så tendenslinjen ud som følger:

$$Y = 386,38 \cdot x + 0,5547 \text{ hvor } R^2 = 0,998 \quad (4.2)$$

Forstærkningen givet ud fra de 7 måle punkter er på 386 hvilket er en del under den målte forstærkning når systemet påtrykkes et sinussignal i stedet for et DC-signal. Dette kan skyldes at der i målingen af DC-signalet er færre målepunkter, og at det dermed bliver en mere usikker måling, da selv en mindre måleusikkerhed har en større indflydelse på den målte forstærkning.


#### 4.2.1.2 Modul test af det analoge filter

I modultesten af det analoge filter blev Analog Discovery brugt som spændingsforsyning, signal generator og som oscilloskop til at måle amplituderne for input signalet og output signalet for filteret.

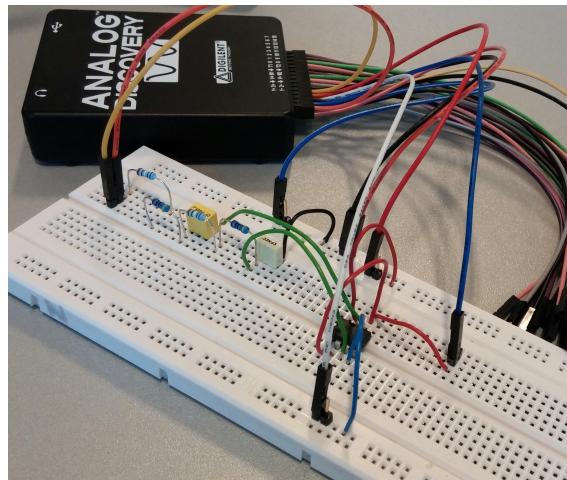


Figur 4.2: Måleopstilling ved modultest af det analoge filter.

I modultesten af det analoge filter ændres frekvensen for det påtrykte sinussignal på filter indgangen. Der blev målt på i alt 21 målepunkter som lå i intervallet 1 Hz til 500 Hz, se bilag XX for de præcise angivelser af de udvalgte målefrekvenser. Output amplituden samt  $\Delta t$  mellem de to grafer blev aflæst på de to grafer. På baggrund af disse målinger blev dæmpningen af signalet afbilledet.

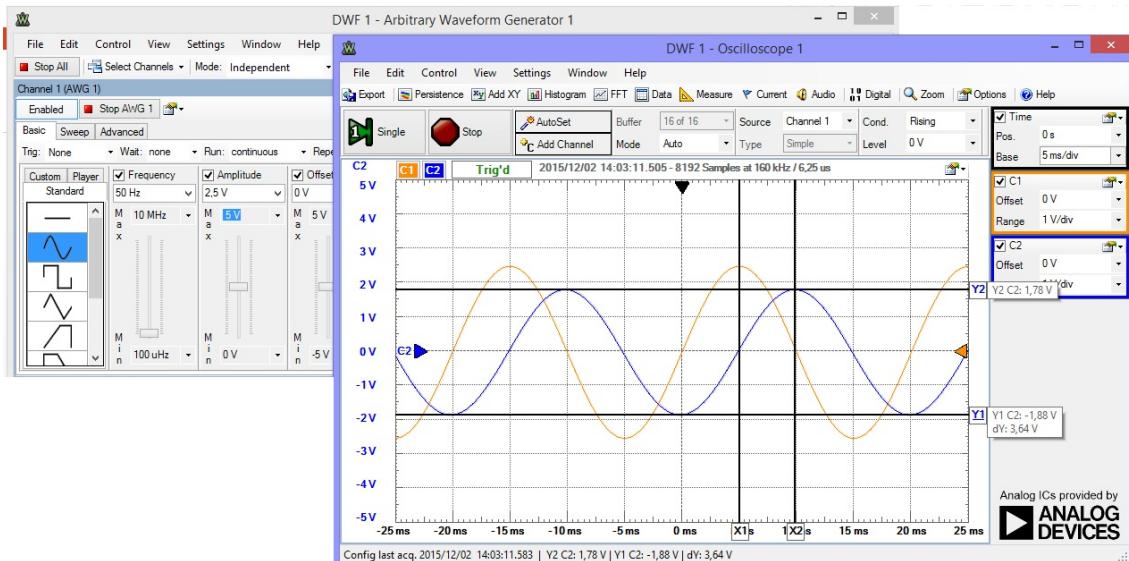

Figur 4.3: Aflæsning af amplitude størrelse for outputsignalet, C2, fra filteret når inputsignalet, C1, har en amplitude på 2,5 V

Herefter blev tidsforskydningen aflæst således at fasedrejet kunne udregnes.

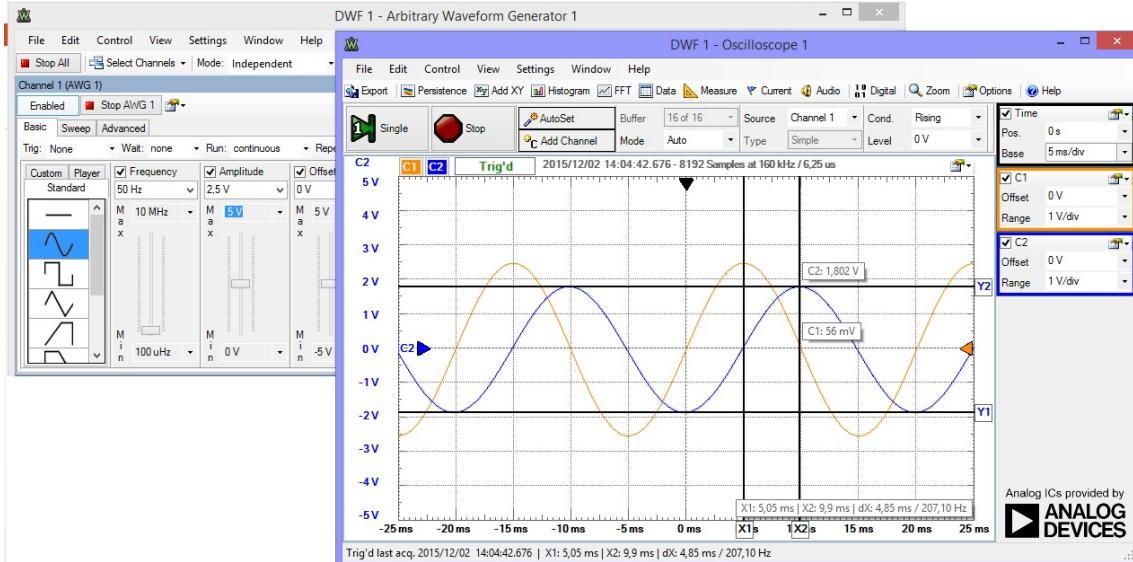

Figur 4.4: Aflæsning af tidsforskydningen for outputsignalet, C2, fra filteret set i forhold til indgangssignalet C1

Det gælder generelt for et 2. ordensfilter af standarttypen som der er arbejdet med igennem projektet, at fasen er  $0^\circ$  en dekade før filterets knækfrekvens og falder med  $-90^\circ/\text{dekade}$  frem til dekaden efter knækfrekvensen. Derfor skal filteret i praksis have et fasedrej på minus  $-90^\circ$  ved knækfrekvensen 50 Hz. Som det ses ud graf!! er fasedrejet ved frekvensen 5 Hz  $-5,2^\circ$ , denne skulle reelt set have været  $0^\circ$ . Ved knækfrekvensen som er sat til 50 Hz er fasedrejet  $-86,4^\circ$ , hvor fasedrejet skulle have været  $-90^\circ$ . Ved målingen for 53 Hz er fasedrejet  $-95,4^\circ$ . Dermed kan der argumenteres for, at filterets reelle knækfrekvens må ligge et sted imellem 50 Hz og 53 Hz. For målingen på 500 Hz er fasedrejet  $-180^\circ$ , hvilket stemmer overens med teorien for 2. ordensfilterets fasekarakteristik.

#### 4.2.2 Software

Til test af softwaren er der først og fremmest foretaget unit test af enkelte udvalgte kodelementer, for at teste om de fungerer efter hensigten. Dette er gjort ved hjælp af debug funktionen i Visual Studio.

### 4.3 Integrationstest

#### 4.3.1 Hardware

#### 4.3.2 Software

# Accepttest 5

---

Version	Dato	Ansvarlig	Beskrivelse
---------	------	-----------	-------------

---

## 5.1 Indledning

I accepttesten testes de krav, der er opstillet i kravspecifikationen. Det fremgår af accepttesten om hvilke scenarier og krav, der er blevet opfyldt og implementeret i systemet og hvilke, der enten ikke er testbare eller ikke er blevet implementeret.

Først vil der være accepttest af use casene altså de funktionelle krav efterfulgt af accepttest af de ikke funktionelle krav.

## 5.2 Accepttest af Use Cases

### 5.2.1 Use Case 1

#### Kalibrer System

Test	Forventet resultat	Faktiske observationer	Godkendt
<i>Hovedscenarie</i>			
1. Forbind systemet til en kendt trykkilde	Systemet er forbundet til en kendt kilde		
2. Tryk 'Start'	Et tryk der kan differentialere fra det kendte kommer frem på skærmen		
3. Skriv resultatet ned og gentag punkt 2., 2 gange mere	Der er tre måleafvigelser skrevet ned		
4. Udregn gennemsnit for afvigelse og omregn til procenter	Afvigelseskoefficient er fundet		
5. Indtast afvigelses koef. i tekstboksen	Systemet er kalibreret		

1. Systemet kalibreres At systemet er kalibreret
- 

*Tabel 5.2: Accepttest af Use Case 1.*

## 5.2.2 Use Case 2

### Opstart system

Test	Forventet resultat	Faktiske observationer	Godkendt
<i>Hovedscenarie</i>			
1. Tryk på "Nulpunktsjuster"-knap	Panel vises med instruktioner om nulpunktsjustering		
2. Tryk på "indlæs tryk"-knap	Et tryk vises i tekstdokumentet		
3. Tryk på "Godkend"-knap	Panelet lukkes		
4. Indtast personale-ID i brugenavnsfeltet; "1234" og indtast personlig kode i kodeordsfeltet; "fido"	Loginoplysninger bliver udfyldt		
5. Tryk på "Log ind"-knappen	Log ind oplysninger er gyldige og stemmer overens med hinanden. "Blodtryks"-vinduet vises		
<i>Undtagelser</i>			
5.a Log ind oplysninger findes ikke i databasen. Besked vises med tekst, der informerer herom	Nye log ind oplysninger indtastes		

*Tabel 5.3: Accepttest af Use Case 2.*

### 5.2.3 Use Case 3

#### Mål blodtryk

Test	Forventet resultat	Faktiske observationer	Godkendt
<i>Hovedscenarie</i>			
1. Tryk på "start"-knappen i blodtryksvinduet	Graf og blodtryksværdier vises på brugergrænsefladen		

Tabel 5.4: Accepttest af Use Case 3.

### 5.2.4 Use Case 4

#### Filtrer signal

Test	Forventet resultat	Faktiske observationer	Godkendt
<i>Hovedscenarie</i>			
1. Påsæt støjsignal med 50 mHz	Signal vises i grafen		
2. Tryk på "Til"-knappen under filter	Signalet udglattes		
3. Tryk på "Fra"-knappen under filter	Signal udglattes ikke		

Tabel 5.5: Accepttest af Use Case 4.

### 5.2.5 Use Case 5

#### Alarmer bruger

Test	Forventet resultat	Faktiske observationer	Godkendt
<i>Hovedscenarie</i>			
1. Indstil cursor til 100 for diastolisk øvre grænse	Der står 100 i pågældende tekstfelt		

2. Indstil cursor til 80 for diastolisk nedre grænse  
Der står 100 i pågældende tekst felt
3. Indstil cursor til 100 for systolisk øvre grænse  
Der står 120 i pågældende tekst felt
4. Indstil cursor til 80 for systolisk øvre grænse  
Der står 80 i pågældende tekst felt
5. Tryk på 'Start' knappen i blodtryks vindue  
Blodtryksmåling startes og Alarm går igang

*Undtagelser*

- 5a Tryk på "udskyd alarm"-knappen  
Alermen udskydes med 3 minutter

Tabel 5.6: Accepttest af Use Case 5.

**5.2.6 Use Case 6****Afslut system**

Test	Forventet resultat	Faktiske observatior- ner	Godkendt
<i>Hovedscenarie</i>			
1. Tryk på "Afslut"-knappen	"Gemme"-vinduet vises		
2. Indtast CPR-nr "1111111111"	CPR-nummeret synligt i pågældende tekst felt		
3. Tryk på "Gem og afslut"-knappen	"Gemme"-vindue og "Blodtryks--vinduet lukkes. "Login"-vinduet vises?		
<i>Undtagelser</i>			
1.a. Tryk på "annuller"-knap	"Gemme"-vinduet lukkes og "Blodtryk"-vinduet vises		

- 2.a. Indtast CPR- nummeret "1234567890" Beskeden "CPR ikke gyldigt." vises

*Tabel 5.7: Accepttest af Use Case 7.*

### 5.3 Accepttest af ikke-funktionelle krav

Ikke-funktionelt krav	Test/handling	Forventet resultat	Faktiske observationer	Godkendt
<i>Functionality</i>				
1. Brugeren skal kunne starte en ny måling indenfor XX sekunder efter opstart	Start programmet, hvorefter der vha. stopur måles opstarts-tiden	At programmet er opstartet og ny måling er igang efter XX sekunder		
2. Systemet skal kunne kalibrere blodtrykssignalen	Opstart programmet, til den automatiske kalibrering er fuldført	At systemet har kaliberet signalen		
3. Systemet skal kunne foretage en nulpunktsjustering	Tryk på "nulstil"-knap	At blodtryksgrafen bliver nulpunktsjusteret		
4. Systemet skal kunne forstærke signalet med det indbyggede analoge antialiaserings filter med en båndbredde på 50 Hz	Start systemet	At signalet er forstærket		

5. Programmet skal kunne vise blodtrykket som funktion af tiden Tryk på "Start måling"-knap At blodtrykket er vist som funktion af tiden på brugergrænsefladen
- 
6. Programmet skal kunne vise blodtrykssignalet kontinuert Tryk på "Start måling"-knap At blodtryksignalet er vist kontinuert på brugergrænsefladen
- 
7. Programmet skal programmeres i C# Start programmet At koden er i C#
- 
8. Programmet skal kunne lagre de målte data i en database Tryk på "Gem"-knap At målingen er gemt i database
- 
9. Programmet skal kunne filtrere blodtrykket via et digitalt filter Tryk på "Filtrer signal" til på radiobutton At det viste blodtrykssignal er filtreret
- 
10. I programmet skal det digitale filter kunne slås til og fra på en radiobutton Tryk "Filtrer signal" til og fra på radiobutton
- 
11. Programmet bør kunne afbilde både systolisk og diastolisk blodtryk med tal Tryk "Start måling" At systolisk og diastolisk blodtryk er afbilledet med tal på brugergrænseflade
- 
12. Programmet bør kunne måle og afbillede puls Tryk på "Start måling" At pulsen er afbilledet på brugergrænseflade
-

13. Programmet bør kunne give alarm, hvis det systoliske blodtryk overstiger 140 mmHg eller falder under 100 mmHg
- 
14. Programmet bør kunne give alarm, hvis det diastoliske blodtryk overstiger 90 mmHg eller falder under XX mmHg
- 
15. Programmet kan angive pulsslag med bib-lyde med varighed af 100 ms og en frekvens på 850 Hz

Påsæt blodtryksignal fra Physionet der overskrider valgte grænser

At en alarm med frekvens på XX begynder

Påsæt blodtryksignal fra Physionet der overskrider valgte grænser

At en alarm med frekvens på XX begynder

Tryk på "Start måling"

At pulsen høres som bib-lyde af 100 ms varighed og med en frekvens på 850 Hz

### *Usability*

- 
1. Blodtrykstallene der udskrives på brugergrænseflade er røde
- Tryk "Start måling"-knap
- At Blodtrykstallene er røde
- 
2. Pulsmålingen skal udskrives på brugergrænsefladen med grønne tal
- Tryk "Start måling"-knap
- At pulsen vises med grønne tal
- 
3. Brugeren skal kunne starte en måling på maksimalt 20 sekunder
- Start systemet op, log ind og tryk "Start måling"
- At programmet er opstartet og ny måling er startet på under 20 sekunder

4. BrugergrænsefladeOpstart lever op til nedensående figur At brugernavnet og logindindeholder samtliga funktioner som på figuren
- 

#### *Reliability*

---

1. Systemet skal kunne køre uden fejl i et år Start system op og vent et år At programmet efter et år kører fejlfrit
2. Systemet skal have en "mean time to restore" på højest 24 timer Start systemet og herefter genstart, hvor der tages tid med et stopur At programmet er klar igen inden den for 24 timer
- 

#### *Performance*

---

1. Systemet bør kunne gemme data på 5 sekunder +/- 10 sekunder Tryk på "Gem og afslut"-knap og tag tid med kunder +/ - 10 sekunder At data er inden for 5 sekunder
- 

#### *Supportability*

---

1. Softwaren er opbygget af tre-lagsmodellen Kig i koden efter data-lag, logik-lag og GUI-lag At koden indeholder et data-lag, et logik-lag og et GUI-lag
- 

Tabel 5.8: Accepttest af Ikke-funktionelle krav

# **Bilag**

---

Fejlrappor

Logbog

Mødereferart

Kode

Samarbejdsaftale